

ポータブルトイレ『らくらくポータブルトイレ』 取扱説明書

このたびは『らくらくポータブルトイレ』をお買い上げいただきありがとうございます。
正しくご使用いただき、お役にたちますようこの説明書をよくお読みください。
ご使用になる前に必ずご一読いただき、本書は大切に保管してください。

安全上のご注意 ★必ずお守りください★

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「軽傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



注意

すき間や開口部に身体の一部が挟まれないようにご注意ください。

介護される方の心身の状態や利用状況によってすき間に挟まれ生命に関わる大きな事故につながる可能性があります。特に頭部や腕や足がはさまれないように十分ご注意ください。



注意

真横から力を加えないでください。転倒するおそれがあります。

窓際、机、ベッドなど、つかまるものがある場所に設置すると、より安全にご使用いただけます。



必ず実行

可動部分がしっかり固定されているか確認してください。

身体が不安定な状態となり、ケガをするおそれがあります。



禁止

トイレ・座いすとしての用途以外には使用しないでください。

子供の遊び道具や踏み台として使用すると、破損またはケガをするおそれがあります。



禁止

改造したり部品の代用品は使用しないでください。

本体が正常にはたらかず、破損またはケガをするおそれがあります。



必ず実行

必ず平坦な場所でお使いください。

滑りやすい場所や安定の悪い場所に設置しないでください。



必ず実行

座る時や使用後立ち上がろうとする時などに、ご利用者自身が身体的安全性を十分に確保できない場合は介助者の付き添いが必要です。



注意



注意

座面あるいは便座を開閉する際には、指をはさまないように注意してください。

座面・便座の側面を開閉するとひじ掛けや本体に指をはさむ原因となります。



必ず実行

火気に近づけないでください。

火災や変形の原因となります。



必ず実行

屋外に放置したり、直射日光に当たったりしないでください。

色あせやひび割れの原因となります。



必ず実行

各部のねじがゆるんでないか時々点検してください。

本体が正常に設置されず、破損又はケガをするおそれがあります。

ご使用になるまえに

〈以下のものが入っていることを確認〉

本体（本体フレーム式）／座面／座面センターカバー／バケツ／バケツのふた

〈組み立て方法〉

- ①お使いになる方の体型に合わせて座面の高さ調整脚部を適当な位置に調整して高さ調整止め金具を穴に確実に差し込んでください。
- ②4本の脚を同じ高さになるようにセットしてください。
- ③座面を本体フレームにセットして座面をはね上げます。
- ④バケツを本体フレームの上面からセットしてください。
- ⑤フタをバケツにセットしてください。
- ⑥座面が水平になるように手前側に倒してください。




注意

高さ調節や清掃の際などに、本体脚部から座面高さ調整用脚部を完全に引き抜かないでください。

各部の名称

- | | |
|------------|--------|
| ①本体フレーム | ⑦ひじかけ |
| ②本体脚部 | ⑧背もたれ |
| ③座面高さ調整用脚部 | ⑨バケツ |
| ④高さ調整止め金具 | ⑩バケツふた |
| ⑤座面 | ⑪バケツ受け |
| ⑥座面センターカバー | |

⑥の座面センターカバーを開けるとフタ付のバケツがあります。

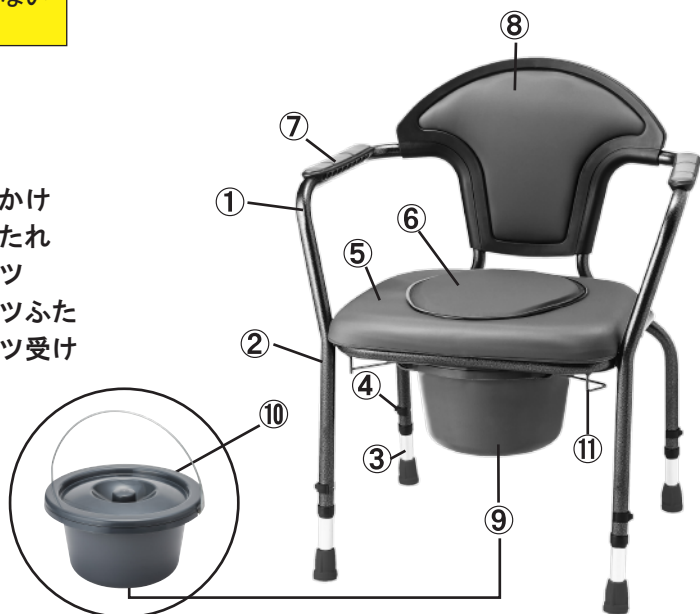

〈ご使用方法〉

ご使用前に一度、健常者が使い勝手のチェックをされることをお勧めします。

- ①座面センターカバーを取り外し、座面をはね上げます。
- ②バケツのフタを取り外す。
- ③バケツが座面の中央になっていることを確かめてください。
- ④座面が水平になるように手前側に倒してください。

〈汚物の処理〉

- ①バケツだけを取り外して汚物をご家庭のトイレに流してください。
- ②バケツは丸洗いしてください。

〈本品の廃棄上のご注意〉

できるだけ素材別に分けて、地域の分別のルールに従って廃棄してください。

製品仕様

品名：ポータブルトイレ『らくらくポータブルトイレ』
品番：111371（オーシャンブルー） 111372（テラコッタレッド）
111373（エメラルドグリーン）
重量：5kg
寸法：全高74～84cm（5段階調整）、座面までの高さ39cm～49cm、
アームの幅（内）51cm・奥行50cm、座面サイズ幅44cm×奥行40cm、
座面～背もたれの高さ35cm
材質：本体フレーム（スチール・アルミニウム）、座面（表面：PVC、内部：ウレタンフォーム）
生産：フランス

※商品の仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。

〈輸入・販売元〉



株式会社 **竹虎**®
ヒューマンケア事業部

商品に関するお問い合わせ
受付時間／平日9:00～17:00

無料
通話

0120-798-777

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com